

# ARC FRAME

腹臥位用手術架台

## アーケフレーム

クランクハンドルを回転させることで、後弯姿勢を無段階調整することが可能です。




■適応

脊椎後側方手術全般

### 本製品特長

#### 日本人の体格に合わせたデザイン

- ・欧米人よりも比較的小柄な日本人患者の体型に合わせ、腹部の圧迫を回避するようにマット形状を設計しています。

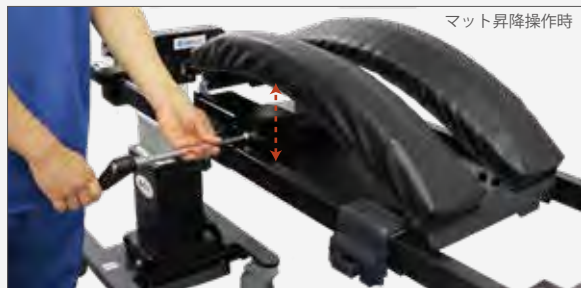

マット昇降操作時

#### 軽い操作感

- ・小さい力でマットの昇降と幅調整をスムーズに行えます。なおクランクハンドルは左右のどちら側からでも挿入・操作が可能です。

### X線透視撮影可能

- ・透視撮影該当箇所にはカーボン素材を使用しており、様々な角度からの撮影が可能です。3D/CT や術中ナビゲーションに対応しています。

### 優れた後弯設定機能

- ・マットの高さ調節範囲が広いので、患者の体格に合わせて様々な後弯角度を設定できます。後弯の強い患者にも対応いたします。

#### 後弯部高さ調節範囲

イソ KMP プラス用：213～293mm(カーボンフレーム上面からパッド天面まで)  
手術台用：230～310mm(底面からパッド天面まで)

### 高性能ゲル素材を採用

- ・マット部分に採用しているEXGEL®には「流動性」があり、身体へのズレや凹凸に寄り添って接触面積を広げるので支持性と安定性を確保し、除圧・分散性にも優れています。またゲルの「柔軟性」は体重による圧力を分散するだけでなく、皮膚表面にかかるズレカ(せん断力)も吸収し、内部組織に生じる応力を防ぎます。

(EXGEL®は株式会社加地の登録商標です)

### セッティング例



イソ KMP プラス用



手術台用

### 仕様

品番	商品名	規格
1-501-019-01	アークフレーム	イソKMPプラス用
1-501-019-02	アークフレーム	手術台用


### アクセサリ(別売)

※『サスティーン』の詳細は該当カタログをご覧ください。

品番	商品名	規格
1-501-019-06	スライドシャフトカバー*	アークフレーム用
1-501-161-55	サスティーン	アークフレーム用

\* 単回使用

#### 『スライドシャフトカバー』

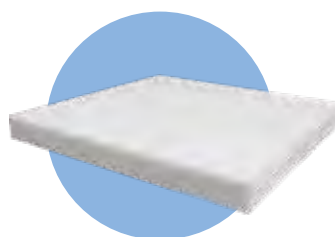

#### 『サスティーン』

通気性・透湿性に優れた肌触りのよいシート。体圧分散性に優れ局所的な圧迫を防ぎます。

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**  
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14  
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022  
URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000134



▲製品詳細サイト