


SMART POSITIONER

側臥位用手術架台

スマートポジショナー

術者の希望する固定位置によって「前腸骨セット」「恥骨セット」のどちらかを選択ください。シンプルな構造のため、確実な固定が可能です。

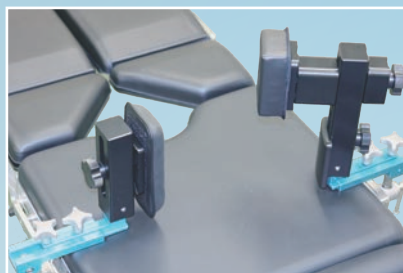

前腸骨MSセット



恥骨MSセット


■適応

人工股関節置換術

人工骨頭置換術

寛骨臼回転骨切り術

その他、側臥位手術一般

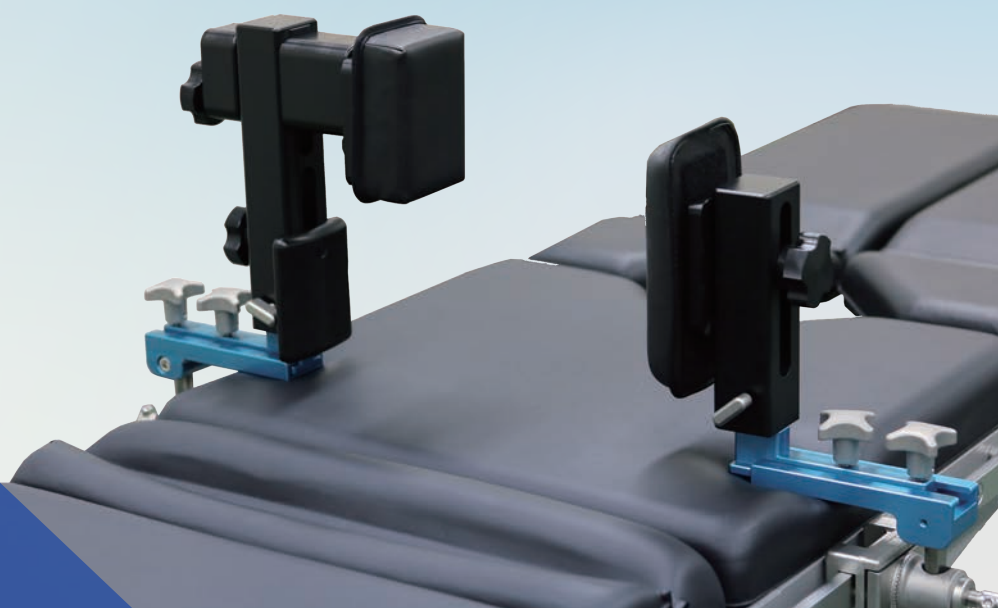

本製品特長

マットおよびストラットの位置を調整できるので患者の体格に合わせた強固な固定が可能です。


固定方法およびマットの大きさによって4種類のセットからお選びください。

大腿骨の屈曲角度 $\geq 100^\circ$

・ストラットの位置を 30° に固定すると患側大腿骨の角度をさらに拡大できます。



0°固定

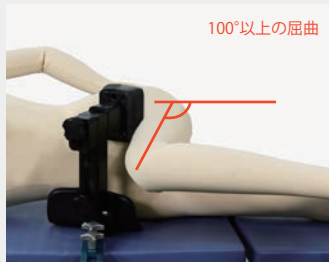

30°固定



前脛骨 (MSまたはSS)セット

・患側前脛骨のみを固定。腹部を圧迫しません。



恥骨 (MSまたはSS)セット

・様々なアプローチ法が可能です。

高性能ゲルを採用

・身体を固定するマット部分にはEXGEL[®]を使用。患者の体格にあわせて中のゲルが自在に動くことで固定時の衝撃・ズレを抑え、患者の確実な固定が可能です。




(EXGEL[®]は株式会社加地の登録商標です)

仕様

品番	商品名	規格
1-501-016-00	スマートポジショナー	前脛骨MSセット
1-501-016-01	スマートポジショナー	前脛骨SSセット
1-501-016-02	スマートポジショナー	恥骨MSセット
1-501-016-03	スマートポジショナー	恥骨SSセット

【構成】	前脛骨 MS セット	前脛骨 SS セット	恥骨 MS セット	恥骨 SS セット
①角型脚受けマット M	1	—	1	—
②角型脚受けマット S	1	2	1	2
③プロテクションプレート	1	—	—	—
④ショートストラット	1	—	2	—
⑤ミディアムストラット	1	—	—	—
⑥プレート固定ボルト	2	—	1	—
⑦マット用プレート	—	2	—	—
⑧スペーサー 35mm	—	—	1	—
⑨スペーサー 65mm	—	—	1	—
⑩スペーサー用プレート固定ボルト	—	—	1	—
⑪自在金具	—	—	2	—
⑫テnderパッドマット極小	—	—	1	—

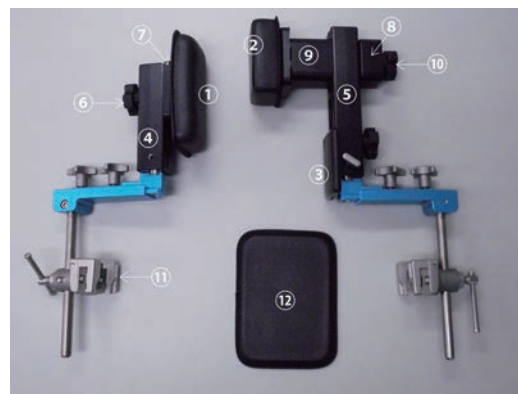

アクセサリ (別売)

※詳細は各製品のカタログをご覧ください




『サスティーン』

通気性・通湿性に優れた肌触りのよいシート。両下肢間に挿入することで接触による圧迫を回避して保護することができます。
※サイズバリエーション: 5種類 (5/10/20/30/40mm)

『マットカバー』

通気性と透湿のある、肌に優しい素材を採用。特殊な二層構造で皮膚の摩擦、ずれを軽減します。(該当商品: 丸型マットM, 角型マットM)

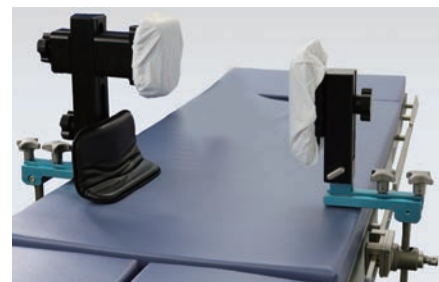

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14

TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000111



▲製品詳細サイト

2607 SM_1